



Riscaldatori a secco a 6 blocchi



Elabora un maggior numero di campioni con i riscaldatori a secco a portata elevata che offrono risultati precisi e affidabili

I versatili riscaldatori di blocchi a secco sono ideali per applicazioni che richiedono stabilità di temperatura. Tutte le unità ospitano un blocco modulare intercambiabile opzionale tra oltre 40 blocchi a scelta. I blocchi sono facili da usare, senza bisogno di strumenti. Lo stretto contatto tra la provetta e il blocco garantisce la massima ritenzione del calore, per un riscaldamento efficiente. I modelli digitali offrono un'uniformità e una stabilità di temperatura eccezionali per risultati ripetibili, mentre i modelli analogici rappresentano una scelta economica.

Caratteristiche standard:

- Design specifico per applicazioni ad alta produttività. La portata di sei blocchi consente la massima flessibilità per elaborare più campioni contemporaneamente con un unico dispositivo.
- Garantiscono l'accuratezza della temperatura. I modelli digitali includono un'esclusiva funzione di taratura a punto singolo per far corrispondere la temperatura visualizzata sul display del riscaldatore di blocchi a uno standard di temperatura esterna noto per tre setpoint di temperatura.
- I modelli digitali sono dotati di comandi touch pad con display LED indipendenti e facili da leggere per la visualizzazione di temperatura e tempo. I robusti modelli analogici vengono controllati mediante due manopole di regolazione della temperatura.

Riscaldatori a secco a 6 blocchi

Modello	HB6AL	HB6DG
Controllo	Non digitale	Digitale
Gamma di temperatura	Temperature basse ambiente + 5 °C – 100 °C; Temperature alte 75 °C – 150 °C	Ambiente + 5 °C – 120 °C
Stabilità a 37 °C	± 2,5 °C	± 0,2 °C
Uniformità a 37 °C	± 0,2 °C	
Tempo di riscaldamento fino a 100 °C	≤ 30 min	
Regolazione della temperatura	Non applicabile	.
Numero di blocchi	6	
Protezione da sovrariscaldamento	Non applicabile	10 °C al di sopra del set point
Ambiente di lavoro	Da 18 °C a 33 °C, con umidità relativa dal 20 all'80%, senza condensa	
Alimentazione elettrica	230 V, 1,79 A, 50/60 Hz	
Consumo di alimentazione elettrica	410 W	
Dimensioni (L x P x A)	203 x 531 x 89 mm	
Peso netto	4,4 kg	

Altre caratteristiche e dotazioni standard

Comandi touch pad e allarme sonoro (modello digitale), alloggiamento in acciaio verniciato. Il modello digitale include l'aggancio della barra di supporto con manopola di blocco, cavo a tre fili rimovibile e presa (inclusi)

Conformità


- **Sicurezza prodotto:** EN 61010-1, EN 61010-2-051
- **Compatibilità elettromagnetica:** EN 61326-1 classe A, ambienti industriali
- **Marchi di conformità:** CE, RCM; TÜV SÜD

Accessori

Blocco modulo per provetta da 10 mm, 24 pozzetti.....	30400151	Blocco modulo micro da 0,2 ml, 80 pozzetti	30400169
Blocco modulo per provetta da 12/13 mm, 20 pozzetti.....	30400152	Blocco modulo micro da 0,2 ml, 64 pozzetti	30400170
Blocco modulo per provetta da 15/16 mm, 12 pozzetti.....	30400153	Blocco modulo da 0,2 ml doppio con foro da 96..	30400171
Blocco modulo per provetta da 20 mm, 8 pozzetti.....	30400154	Bagno sabbia, blocco da 6 unità.....	30400176
Blocco modulo per provetta da 25 mm, 6 pozzetti.....	30400155	Sabbia, sacco da 0,5 kg	30400177
Blocco modulo combinato - Blocco combinazione provetta: 6 mm, 12/13 mm, 25 mm	30400156	Sfere in acciaio inossidabile, 0,5 kg	30400178
Blocco modulo per micro conico da 0,5 ml, 30 pozzetti.....	30400157	Copertura a 6 blocchi a basse temperature	30400181
Blocco modulo per provetta da 6 mm, 30 pozzetti.....	30400158	Blocco modulo per fiala da 12 mm, 20 pozzetti..	30400182
Blocco modulo per micro conico da 1,5 ml, 20 pozzetti.....	30400159	Blocco modulo per fiala da 15 mm, 20 pozzetti..	30400183
Blocco modulo solido.....	30400160	Blocco modulo per fiala da 17 mm, 12 pozzetti..	30400184
Blocco modulo cuvetta - 12 cuvette, 2 pozzetti ..	30400161	Blocco modulo per fiala da 19 mm, 12 pozzetti..	30400185
Blocco modulo per provetta da microcentrifuga da 11,5/1,5 ml, 20 pozzetti	30400162	Blocco modulo per fiala da 21 mm, 9 pozzetti . .	30400186
Blocco modulo 250 per microlitro da 6 mm, 30 pozzetti.....	30400163	Blocco modulo per fiala da 23 mm, 8 pozzetti . .	30400187
Blocco modulo piastra di titolazione.....	30400164	Blocco modulo per fiala da 25 mm, 8 pozzetti . .	30400188
Blocco modulo da 12/13 mm, 16 pozzetti.....	30400165	Blocco modulo per fiala da 28 mm, 6 pozzetti . .	30400189
Blocco modulo doppio solido	30400166	Blocco modulo per fiala da 16 mm, 15 pozzetti..	30400190
Blocco modulo per provetta da 35 mm, 4 pozzetti.....	30400167	Blocco modulo per provetta da 2,0 ml, 20 pozzetti.....	30400191
Blocco modulo per centrifuga conica da 50 ml, 5 pozzetti.....	30400168	Blocco modulo per provetta Corning da 2,0 ml, 20 pozzetti.....	30400192
		Blocco modulo combinato - Configurazione provetta per centrifuga: 50 ml - 2 pozzetti, 15 ml - 3 pozzetti, 1,5 ml - 4 pozzetti	30400193
		Blocco modulo combinato - Configurazione microprovetta: 2 ml - 5 pozzetti, 1,5 ml - 10 pozzetti, 0,5 ml - 6 pozzetti	30400194
		Blocco modulo da 17/18 mm, 12 pozzetti.....	30400195
		Kit sonda in acciaio inossidabile*.....	30400246

*Non applicabile per HB6AL

Dimensioni

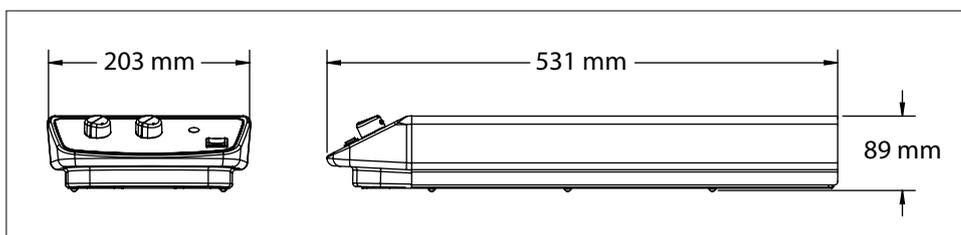

JOINTLAB[®]
European Laboratory Equipment

www.jointlab.com
www.frigolab.it

Via C. Treves 57, Trezzano sul Naviglio
Milano, Italy
+39.02.39310823
info@jointlab.com