



# Ranger® 4000

Bilancia da banco compatta

 **JOINTLAB®**  
European Laboratory Equipment  
www.jointlab.com  
www.frigolab.it  
Via C. Treves 57, Trezzano sul Naviglio  
Milano, Italy  
+39.02.39310823  
info@jointlab.com



## **Le migliori prestazioni per pesate industriali affidabili**

La bilancia multiuso Ranger 4000 è lo strumento adatto per applicazioni di pesatura industriale dove il valore è importante, ma la qualità, l'affidabilità e la funzionalità non possono essere compromesse. Portatile, grazie all'alloggiamento in metallo pressofuso e a una batteria ricaricabile, questa bilancia è dotata di sette modalità applicative in grado di fornire risultati per svariate esigenze di pesatura e misura.

### **Le caratteristiche standard includono:**

- **L'alloggiamento in metallo offre resistenza e protezione e massimizza la vita del prodotto**  
—L'alloggiamento resistente in metallo e i piedini in gomma antiscivolo forniscono la protezione e la stabilità necessarie per pesature industriali gravose, estendendo inoltre la vita utile della bilancia.
- **Il display luminoso a LED bianchi rende la bilancia utilizzabile anche in condizioni di scarsa illuminazione**—Ranger 4000 possiede il display a LED bianchi più grande della sua categoria; gli indicatori acustici e i LED di controllo del peso la rendono altamente funzionale anche in ambienti industriali rumorosi e scarsamente illuminati.
- **Il software di facile utilizzo per l'utente rende Ranger 4000 molto semplice da utilizzare**  
—Dedica tempo al tuo lavoro, non all'apprendimento delle funzionalità della bilancia. Il software SmarText™ rende la configurazione della bilancia e il suo utilizzo molto semplici.
- **Il tempo di stabilizzazione estremamente rapido di un secondo aumenta l'efficienza**  
—Con un tempo di stabilizzazione di appena un secondo, Ranger 4000 lavora efficacemente per aumentare i livelli di produttività.

# Bilancia da banco compatta **Ranger® 4000**

## L'alloggiamento in metallo assicura la giusta protezione

Con l'alloggiamento sigillato in metallo pressofuso e i piedini in gomma antiscivolo, Ranger 4000 è stata costruita per massimizzare la vita del prodotto, resistere, se utilizzata in ambienti difficili, e assicurare un esatto funzionamento negli ambienti industriali.



## Il display a LED bianchi si illumina e mostra i risultati

Il grande display a LED bianchi da 1,5" di Ranger 4000 è largo il 57% in più dei display presenti sulle altre bilance della sua categoria. Insieme con i LED di controllo del peso e gli indicatori acustici, Ranger 4000 è stata costruita per affrontare le sfide che spesso si incontrano negli ambienti di pesatura industriale.



## Il software intuitivo consente una navigazione semplice

Potenziata dal software SmarText™, la semplice navigazione di Ranger 4000 funziona in tandem con i tasti dedicati della bilancia, creando così le condizioni per un utilizzo che richiede il minimo sforzo.

## Stabilizzazione rapida

Ranger 4000 garantisce risultati esatti in un secondo. La stabilizzazione rapida elimina il tempo di attesa e vi consente di muovervi alla velocità che desiderate, senza che siano le vostre apparecchiature di pesatura a decidere per voi. Lavorate con efficienza e con la sicurezza di ottenere risultati esatti. Con la bilancia Ranger 4000 ottimizzate le prestazioni senza sacrificare la precisione delle pesate.

## Modalità applicative

- **Pesatura**—Calcolo del peso degli articoli nell'unità di misura selezionata.
- **Pesata percentuale**—Calcolo della percentuale del peso di un campione rispetto ad un peso di riferimento prestabilito.
- **Conteggio pezzi**—Conteggio pezzi con pesi uniformi.
- **Pesata di controllo/Percentuale/Conteggio**—Confronta il peso, la percentuale e il conteggio di un campione rispetto ai limiti target impostati. Possibilità di scelta tra Controllo Pesata, Controllo Percentuale e Controllo Conteggio.
- **Accumulo**—Totalizzazione del peso, conteggio e percentuale. Calcola il peso totale accumulato, il conteggio o la percentuale dei singoli articoli.
- **Pesata dinamica**—Pesata di un carico instabile. La bilancia determina la media di più pesate effettuate in un determinato periodo di tempo.
- **Blocco display**—Blocca l'ultima pesata stabile manualmente o automaticamente sul display della bilancia. Viene attivato impostando a zero l'intervallo di tempo nella modalità Pesata Dinamica.



## Connettività standard con opzioni flessibili

La RS232 standard, l'Ethernet, la 2a RS232 e la USB opzionali, offrono funzionalità di trasferimento dati aggiuntive e consentono la connessione a molteplici periferiche.


Potete collegare una ulteriore piattaforma di alta portata tramite l'opzione 2a bilancia; sfruttate così la precisione e le caratteristiche avanzate di Ranger 4000 anche in una applicazione di alta portata.

## Alimentazione interna e batteria ricaricabile


Basta con le limitazioni imposte dalla distanza delle prese di corrente! Ranger 4000 è dotata di una batteria ricaricabile al piombo che può fornire potenza per oltre 100 ore! Può essere inoltre alimentata con il cavo di rete, facile da collegare e con ingombro minimo che si adatta automaticamente alle diverse tensioni e frequenze delle linee elettriche, eliminando le interruzioni del flusso di lavoro causate da carenza o mancanza di alimentazione.

## Metrologia

Ranger 4000 è conforme ai requisiti di Classe III per OIML R76 e EN 45501.

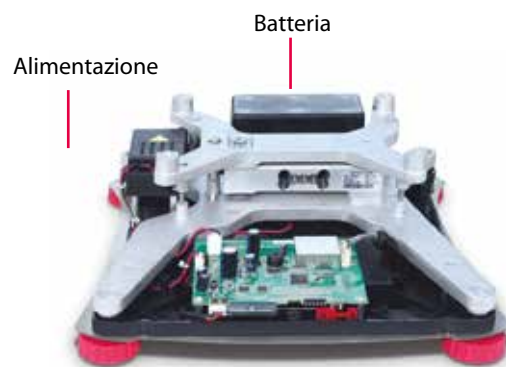

## Dimensioni struttura

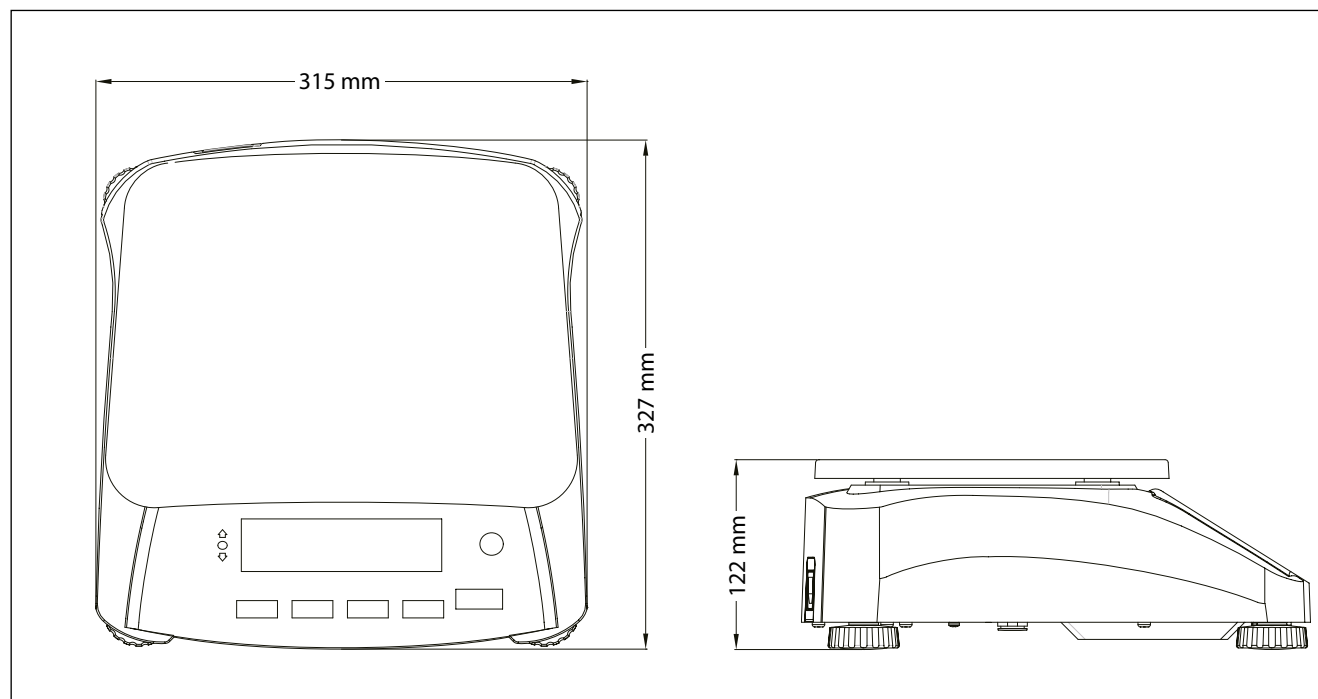

# Bilance da banco compatte **Ranger® 4000**

| Modelli                                                    | R41ME3                                                                                                                                            | R41ME6                        | R41ME15                         | R41ME30                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Portata × risoluzione                                      | 3 × 0.0001 kg<br>3000 × 0.1 g                                                                                                                     | 6 × 0.0002 kg<br>6000 × 0.2 g | 15 × 0.0005 kg<br>15000 × 0.5 g | 30 × 0.001 kg<br>30000 × 1 g |
| Massima risoluzione del display                            | 1:30000                                                                                                                                           | 1:30000                       | 1:30000                         | 1:30000                      |
| Modelli certificati                                        | R41ME3-M                                                                                                                                          | R41ME6-M                      | R41ME15-M                       | R41ME30-M                    |
| Portata certificata × risoluzione                          | 3 × 0.001 kg<br>3000 × 1 g                                                                                                                        | 6 × 0.002 kg<br>6000 × 2 g    | 15 × 0.005 kg<br>15000 × 5g     | 30 × 0.01 kg<br>30000 × 10 g |
| Risoluzione certificata/approvata                          | 1:3000                                                                                                                                            | 1:3000                        | 1:3000                          | 1:3000                       |
| Struttura                                                  | Piatto in acciaio inossidabile, alloggiamento in alluminio pressofuso                                                                             |                               |                                 |                              |
| Unità di misura                                            | kg, g, lb, oz, lb:oz                                                                                                                              |                               |                                 |                              |
| Modalità applicative                                       | Pesata, pesata percentuale, conteggio pezzi, controllo peso, controllo conteggio, controllo percentuale, accumulo, pesata dinamica/blocco display |                               |                                 |                              |
| Display                                                    | Display a LED bianchi, altezza 40 mm/1,5", 6 cifre, 7 segmenti                                                                                    |                               |                                 |                              |
| Indicatori controllo peso                                  | 3 LED (giallo, verde, rosso) con funzionamento configurabile e segnalatore acustico di allarme                                                    |                               |                                 |                              |
| Tastiera                                                   | 5 tasti meccanici                                                                                                                                 |                               |                                 |                              |
| Campo di azzeramento                                       | 4% o 20% dell'intera portata della bilancia                                                                                                       |                               |                                 |                              |
| Campo di tara                                              | Fino alla portata massima, per sottrazione                                                                                                        |                               |                                 |                              |
| Tempo di stabilizzazione                                   | 1 secondo                                                                                                                                         |                               |                                 |                              |
| Controllo zero automatico                                  | Off, 0,5, 1 o 3 divisioni                                                                                                                         |                               |                                 |                              |
| Portata di sovraccarico sicuro                             | 150% della portata                                                                                                                                |                               |                                 |                              |
| Alimentazione elettrica                                    | Alimentazione universale interna 100-240 Vca/50-60 Hz, batteria ricaricabile al piombo                                                            |                               |                                 |                              |
| Autonomia batteria                                         | 100 ore di uso continuo con tempo di ricarica di 12 ore                                                                                           |                               |                                 |                              |
| Regolazione                                                | Esterna, con peso di regolazione selezionabile dall'utente                                                                                        |                               |                                 |                              |
| Interfacce                                                 | RS232 standard; opzionali: 2a bilancia, 2a RS232, USB, Ethernet                                                                                   |                               |                                 |                              |
| Intervallo temperatura di funzionamento                    | da -10° C a 40° C                                                                                                                                 |                               |                                 |                              |
| Dimensioni del piatto (larghezza × lunghezza)              | 300 mm × 225 mm                                                                                                                                   |                               |                                 |                              |
| Dimensioni bilancia (larghezza × lunghezza × altezza)      | 315 × 327 × 122 mm                                                                                                                                |                               |                                 |                              |
| Dimensioni di spedizione (larghezza × lunghezza × altezza) | 397 × 447 × 195 mm                                                                                                                                |                               |                                 |                              |
| Peso netto                                                 | 5.9 kg                                                                                                                                            |                               |                                 |                              |
| Peso di spedizione                                         | 7.2 kg                                                                                                                                            |                               |                                 |                              |

## Altre caratteristiche e dotazioni standard

Piatto in acciaio inossidabile, gancio per la pesata da sotto integrato, pannello frontale sigillato, interruttore di blocco del menu, bolla di livello frontale, piedini di livellamento regolabili, impostazioni ambientali e di stampa automatica selezionabili, indicatore di stabilità, indicatore di sovraccarico e sottocarico, indicatore del livello di batteria basso, spegnimento automatico, tara automatica

## Conformità

- **Metrologia:** EN 45501 (T8252); OIML R76 (R76/2006-NL1-15.21)
- **Sicurezza prodotto:** IEC/EN 60950-1
- **Compatibilità elettromagnetica:** IEC/EN 61326-1
- **Altro:** RAEE/ROHS

## Accessories

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Kit 2ª bilancia.....                              | 30037446 |
| Kit Ethernet .....                                | 30037447 |
| Kit 2ª RS232.....                                 | 30037448 |
| Kit USB .....                                     | 30037449 |
| Capottina di protezione .....                     | 30240697 |
| Stampante ad impatto SF40A completa di cavo ..... | 30064202 |
| Stampante di etichette T4 .....                   | 30057588 |



**JOINTLAB®**  
European Laboratory Equipment

[www.jointlab.com](http://www.jointlab.com)  
[www.frigolab.it](http://www.frigolab.it)

Via C. Treves 57, Trezzano sul Naviglio  
Milano. Italy  
+39.02.39310823  
[info@jointlab.com](mailto:info@jointlab.com)