



STUFE DA LABORATORIO

STF

Made in **ITALY**

FORTI E PRECISI

Stufe da laboratorio economiche ma nel contempo al top della tecnica e degli accessori inseriti: tutto di serie! Regolazione fine della temperatura, display chiaro e completo, classe di sicurezza al top, regolazione frontale del camino posteriore.

I MATERIALI

- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacido
- Camera interna in acciaio inox 18/8

I SISTEMI DI SICUREZZA

- Sistema elettronico indipendente di sicurezza: il circuito elettronico NON dipende dalla scheda di termoregolazione e funzionerà anche in caso di default della scheda principale.
- Se la temperatura supera il set point di un certo numero di gradi (impostabili dall'utente) si accende il led e la stufa continuerà a funzionare sulla temperatura di sicurezza.





DI SERIE


- Termoregolatore PID con doppio display e temperatura regolabile fino a 300°C
- Ripiani
- Camino posteriore di 45 mm per scarico fumi con dispositivo di regolazione (apertura/chiusura) frontale
- Foro 10 mm sul lato superiore
- Timer digitale da 0 a 99 ore e 59 min + ∞
- Visualizzazione di potenza erogata
- Auto-tuning (calibrazione automatica della temperatura)
- Possibilità di correzione manuale della temperatura (per es. con termometro certificato)
- Classe di sicurezza DIN 3.1, la più alta
- Regolazione dell'allarme di sovra-temperatura
- Protezione IP: 42
- Maniglia ergonomica, facile da usare e robusta

Per i modelli con ventilazione forzata:

- Ventilazione regolabile da 0% a 100%

CLASSE DI PROTEZIONE 3.1 (DIN 12880)

Questa caratteristica prevede una funzione di protezione in caso di malfunzionamento e aumento incontrollato della temperatura interna. L'utente imposta il limite di controllo della temperatura. In caso di allarme questa temperatura sarà l'impostazione di default fino a quando il problema non sarà risolto.

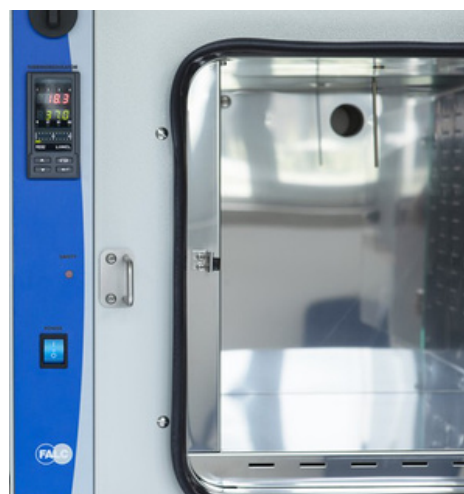

MODELLI	52	120	240	400
Potenza in Watt	1200	1600	2600	3400
Capacità in litri	52	120	240	400
Peso in Kg	55	68	80	100
Dimensioni esterne LxPxA (mm)	705x570x610	825x680x740	925x710x1030	1025x790x1230
Dimensioni interne LxPxA (mm)	390x350x390	500x470x520	600x500x800	700x580x1000
Ripiani	2 (max 6)	2 (max 8)	2 (max 12)	2 (max 15)
Modello con ventilazione naturale	STF-N 52	STF-N 120	STF-N 240	STF-N 400
Modello con ventilazione forzata	STF-F 52	STF-F 120	STF-F 240	STF-F 400

Precisione di temperatura °C*

con ventilazione naturale / forzata

a 70°C	± 1,5 / 1	± 2 / 1	± 2,5 / 1,5	± 3 / 1,5
a 150°C	± 2,5 / 1,5	± 3 / 1,5	± 3,5 / 2	± 3,5 / 2
a 300°C	± 3 / 2	± 3,5 / 2,5	± 3,5 / 2,5	± 4 / 3

*I dati forniti sono indicativi; la precisione può variare anche dal tipo di campione posto all'interno e dalla modalità d'uso.