

## Scheda tecnica

## Incubatore da laboratorio CLW 180 Smart



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

### Vantaggi del controller SMART:

- Touch screen a colori da 4,3", nitido
- Porte LAN, USB per trasferimento dati
- Programmi di tempo e temperatura multisegmento
- allarmi visivi e sonori
- memoria interna per programmi e memorizzazione dati
- registro eventi
- manuale utente da scaricare direttamente
- Modifica rapida dei parametri del programma
- Barra degli allarmi
- operare con i guanti



Smart - preview screen



### Dati Tecnici

Convezione dell'aria	Forzata
Capacità della camera [l]	180
Capacità lavorativa [l]	180
Controller	Microprocessore PID
Display	Touch screen a colori da 4,3".

### Temperatura

Range di temperatura [°C]	5°C sopra la temperatura ambiente ... +100°C
Risoluzione della temperatura ogni ... [°C]	0,1
Oscillazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,1
Variazione della temperatura a 37°C [+/-°C]*	0,3
Protezione da temperatura	Classe 2.0 secondo DIN 12880 / classe 3.1 (opzione)

### Camera

Tipo di porta	Doppia(5) / porta con finestra di ispezione (opzione)
---------------	---

### Interno

Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301
IG Smart	Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301

### Alloggi


Smart	Lamiera verniciata a polvere
IG Smart	Acciaio inox con finitura in lino

### Dimensioni complessive [mm] /1/

Larghezza A	660
Altezza B	1040
Profondità C	820

### Dimensioni interne [mm]

Larghezza D	470
Altezza E	720
Profondità F	560

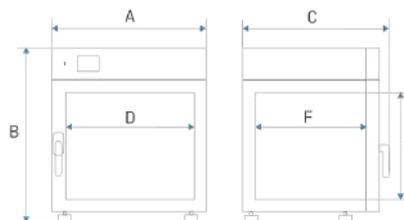

Ripiani (standard   max)	3   9
Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/	25
Versione con ripiano rinforzato (PW) [kg] /3/	50
Carico di lavoro massimo dell'unità [kg]	75
Versione con unità rinforzata (W) [kg] /4/	120
Peso [kg]	92

## PARAMETRI ELETTRICI

Voltaggio**	230V 50-60Hz
Potenza nominale [W]	650
Garanzia	24 mesi
Produttore	POL-EKO

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)

\* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:

$K = \pm (T \text{ media max.} - T \text{ media min.}) / 2$

\*\* - altri alimentatori a richiesta


1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione, la larghezza non include il tappo in gomma da 20 mm

2 - su piano di carico uniforme

3 - ripiano rinforzato

4 - porta interna in vetro aggiuntiva

## OPZIONI E ACCESSORI

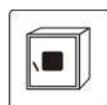

Numero d'ordine: \*/A

Porta con finestra




Numero d'ordine: \*/P INOX

Ripiano in filo di acciaio INOX




Numero d'ordine: \*/PP

Ripiano perforato

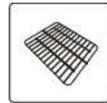

Numero d'ordine: \*/PW

Ripiano rinforzato

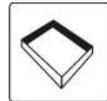


Numero d'ordine: KUW GN\*/\*

Cuvette in acciaio inox




Numero d'ordine: QLK\*

Ruote

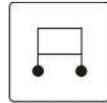

Numero d'ordine: \*/S o \*/S INOX

Tavolo con ruote

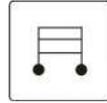

Numero d'ordine: \*/ST o \*/S INOX

Base su ruote



Numero d'ordine: \*/W

Versione rinforzata



Numero d'ordine: OWW/LED

Illuminazione interna









Numero d'ordine: HEPA

Filtro HEPA dell'aria pulita



**POL-EKO**  
Perfect Environment

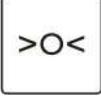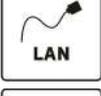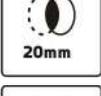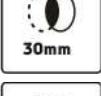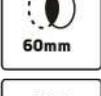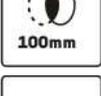	Numero d'ordine: LabDesk	LabDesk software
	Numero d'ordine: BRT/*L IQ/OQ/PQ	Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ
	Numero d'ordine: */3.1	Protezione da sovratemperatura classe 3.1 secondo DIN 12880
	Numero d'ordine: BPP 12	Batteria di riserva per il display
	Numero d'ordine: PORT ALARM	Allarme della porta
	Numero d'ordine: LANK	Cavo LAN
	Numero d'ordine: OCZ/20	Porta di accesso non standard da 20 mm
	Numero d'ordine: OCZ/30	Porta di accesso aggiuntiva 30 mm
	Numero d'ordine: OCZ/60	Porta di accesso non standard da 60 mm
	Numero d'ordine: OCZ/100	Porta di accesso non standard da 100 mm
	Numero d'ordine: KD	Controllo di accesso



**JOINTLAB**<sup>®</sup>  
European Laboratory Equipment

[www.jointlab.com](http://www.jointlab.com)

[www.frigolab.it](http://www.frigolab.it)

Via C. Treves 57, Trezzano sul Naviglio  
Milano, Italy

+39.02.39310823

[info@jointlab.com](mailto:info@jointlab.com)